



TECHNISCHES DATENBLATT

FFP2 Mundschutz Maske ohne Ventil

Die Atemschutzmaske schützt vor gesundheitsschädlichen Stoffen wie festen und flüssigen Stäuben, Rauch und Aerosolen (FFP2). Der Artikel filtert mindestens 94% Bakterien, Staub, Chemikalien, Partikel, Pollen und Rauch.

KSI CARE SERIE

FFP2 Mundschutz Maske ohne Ventil

KSi Artikel-Nr.: 128-KSI-Care-FFP2-Easewell

ZERTIFIZIERUNGEN / PRODUKTBEZOGENEN NORMEN

Masken der Marke Easewell erfüllen folgende Normen

Normen: EN 149:2001 + A1:2009 laut (EU)Verordnung zur PSA (persönliche Schutzausrüstung, 2016/425

CE konform (notifizierte Stelle CE2834)

Art der Einzelverpackung: Polybeutel

Art der UVE: Designkarton

Herstellerland: Volksrepublik China

PRODUKTBESCHREIBUNG / MATERIAL

- PP Non-Woven und melt blown Filtermaterial
- 3-lagige Filterschicht
- Partikelfiltereffizienz (PFE) >94%
- Feinstaubfilterung (PM 2, 5)
- 3D Design, latexfrei, uni size
- atmungsaktiv, müheloses Ein- und Ausatmen
- leicht modellierbarer Nasenbügel mit PE-Ummantelung für perfekten Sitz
- Gewicht: ca. 10g
- Größe: 10,7 x 15,5 cm
- Farbe: weiß



MERKMALE

- **Nasendichtlippe:**
Die Nasendichtlippe verbessert den Dichtsitz
- **Flexibles Material:**
Die Masken haben eine standhafte und haltbare Außenstruktur.
- **Faltbar:**
verbindet alle Vorteile unserer klassischen Masken, ist jedoch leichter zu transportieren. Mit einem Griff tragefertig.
- **Einzeln verpackt:**
Geschützt vor Staub und Schmutz, hygienisch verpackt bis zum Gebrauch.

NR (non reusable) = Einmaliger Gebrauch.
Komfortabel und formstabil die ganze Schicht.

EINSATZBEREICHE

klinische oder zivile Anwendung


VERPACKUNG

Menge Innenverpackung	10 Stück pro UVE
Menge Außenkarton	800 Stück im Masterkarton
Voll-Palette	11.200
L x B x H Außenkarton in cm	65,6 x 52,5 x 27,8
Volumen in m ³ Außenkarton	0,0957
Bruttogewicht Außenkarton in Kg.	8,5

AUSZEICHNUNG

Zolltarifnummer	63079098990
Mindesthaltbarkeit	2 Jahre

AUFSETZANLEITUNG

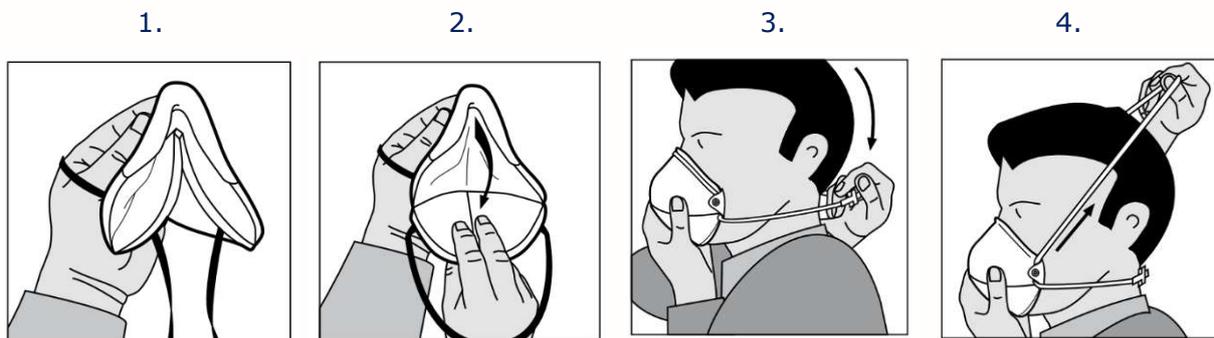

Prüfung: Vor der Benutzung feststellen, ob der Atemschutz für den geplanten Einsatz geeignet ist. Achten Sie darauf, dass die Maske richtig angelegt ist. Vor Gebrauch muss der Anwender im richtigen Umgang mit dem Produkt nach den nationalen Regelungen geschult werden.

Aufsetzanleitung: Halten Sie die Maskenschale in einer Hand (1), mit dem Nasenbügel an den Fingerspitzen, die Kopfbänder hängen unter der Hand (2). Setzen Sie die Maske unter dem Kinn an, den Nasenbügel nach oben. Ziehen sie das obere Band auf den Hinterkopf, das untere bis unter die Ohren (3/4). Die Bänder dürfen nicht überdreht sein. Passen Sie den Nasenbügel mit beiden Händen Ihrer Nasenform an, um einen guten Dichtsitz zu erreichen. Wird der Nasenbügel nur mit einer Hand angedrückt, so kann sich eine Falte bilden, die den Dichtsitz verschlechtert. Der Dichtsitz der Maske im Gesicht sollte vor Betreten des Arbeitsplatzes überprüft werden.

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen. Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.